




autotest
VIH®

autotest
santé®

KÄYTTÖOHJE

- autotest VIH® on HIV:n vasta-aineiden havaitsemiseen tarkoitettu kotitesti, joka tehdään sormenpästä otettavasta verinäytteestä.
- Testitulokset on **luotettava, kun altistustilanteesta on kulunut 3 kuukautta.**
- autotest VIH® on kertakäyttöinen *in vitro* - testi.
- autotest VIH® on tarkoitettu kotikäyttöön.
- Testin suorittamiseen kuluu noin 5 minuuttia ja tulos on luotavissa 15 minuutin kuluttua.
- Tarvitset kellon tai muun ajanottovälineen.
- Lue käyttöohje kokonaisuudessaan huolella ennen testin aloittamista.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

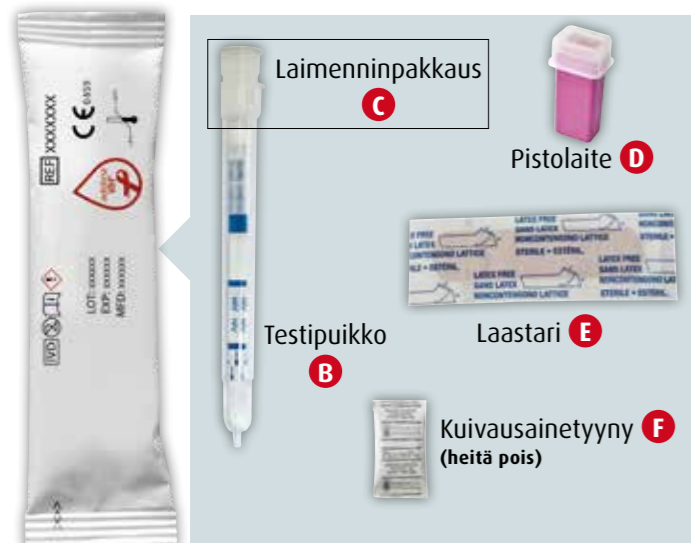

Foliopakkaus **A**



Teline **G**




Desinfiointipyyhe **H**




Sideharsotaitos **I**

VAIHE 1

- Aseta teline **G** tasaiselle alustalle.
- Irrota testipuikon **B** päässä oleva laimenninpakkaus **C**.

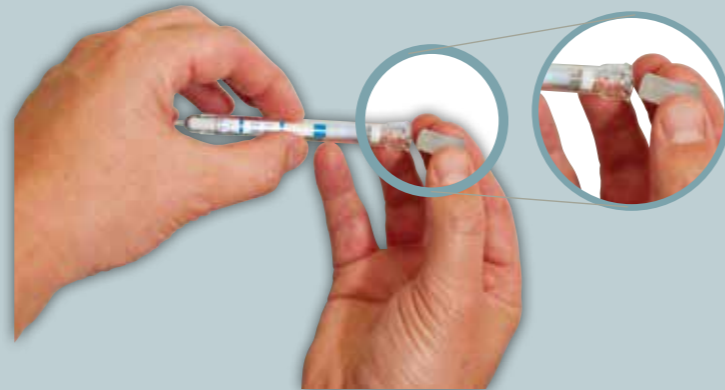


- Työnnä laimenninpakkaus sormen avulla telineen **G** pohjaan.

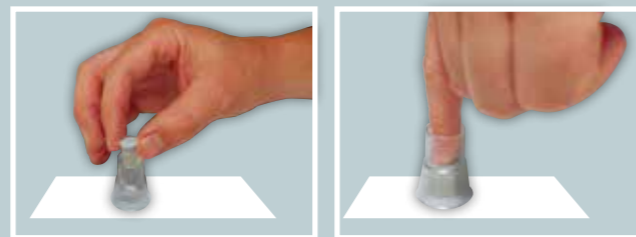

VAIHE 2 (VAIHEET 2 JA 3 ON SUORITETTAVA KESKEYTYKSETTÄ)

- Pese kädet mieluiten lämpimällä vedellä ja kuivaa ne.
- Avaa pakkaukset, joissa on desinfiointipyyhe **H** ja sideharsotaitos **I**.
- Puhdista sormenpää desinfiointipyyhkeellä **H** ja odota, että sormi on kuiva.
- Ota pistolaite **D** ja irrota sen läpinäkyvä suojuks. Aseta pistolaitteen punainen puoli sormenpäähän sivua vasten. Lävistä iho painamalla pistolaitetta tiukasti ihoa vasten.

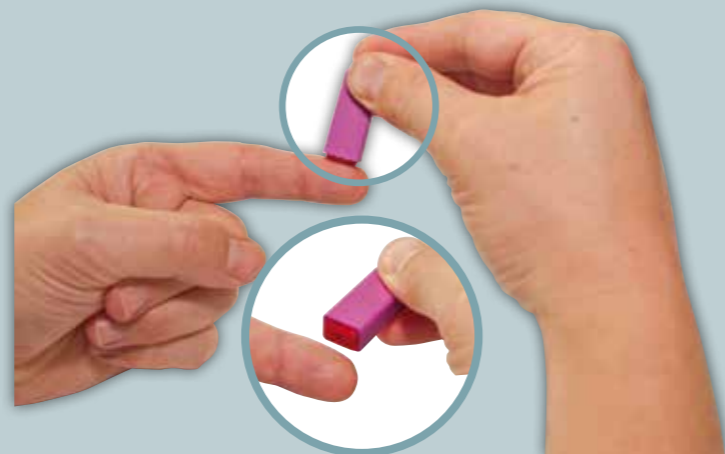

VAIHE 2 (JATKO)

- Paina sormenpäästä varovasti, niin että muodostuu ensimmäinen veripisara. Pyyhi se sideharsotaitoksella **I**.



- Paina sormenpäästä uudelleen, mutta vain varovasti, niin että muodostuu uusi, suuri veripisara.

- Aseta testipuikon **B** pää kosketuksiin veripisaran kanssa kuvan osoittamalla tavalla (90° kulmaan), niin että testipuikon pää täyttyy verellä.




VAIHE 3

- Ota esiin teline **G** jossa on laimenninpakkaus **C**. Aseta se tasaiselle alustalle.



- Tartu testipuikkoon **B** siten, että sen kärki osoittaa alaspäin. Työnnä se telineeseen **G** siten, että laimenninpakkaukseen **C** tulee reikä.

PAINA TIUKASTI TUNNET 3 NAPSAHDUSTA

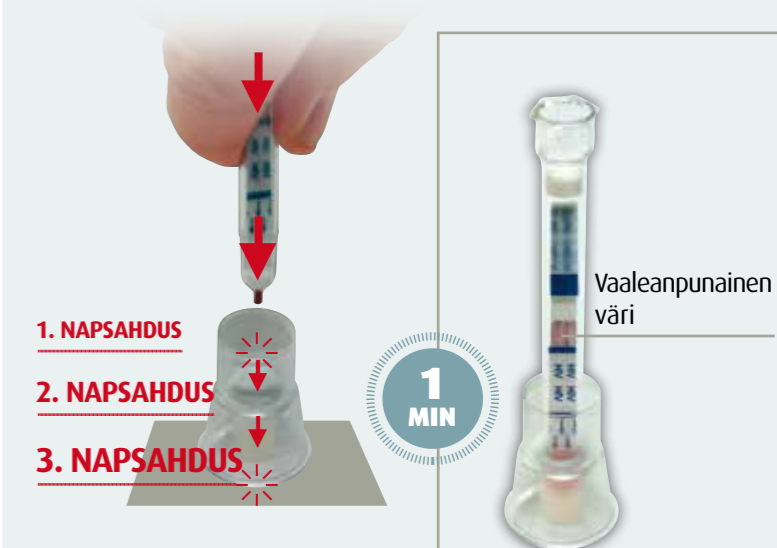

- Varmistu että testi-ikkunassa alkaa näkyä vaaleanpunaista väriä minuutin kuluessa testipuikon asettamisesta.
- Laita laastari **E** sormeesi.

TESTI ON KÄYNNISSÄ

⚠ Mikäli vaaleanpunainen väri ei ilmesty minuutin kuluessa, työnnä testipuikkoa **B** voimakkaasti, niin että se menee paikoilleen.

Testipuikon on oltava pystyasennossa vaiheen 4 loppuun saakka.

VAIHE 4

- Käynnistä ajastin, merkitse aika muistiin ja odota 15 minuuttia ennen tuloksen lukemista.



Älä odota yli 20 minuuttia ennen tulosten lukemista




VAIHE 5: KOTITESTIN TULOKSEN LUKEMINEN

NEGATIIVINEN TESTITULOS

Jos kotitestisi näyttää alla olevan kuvan mukaiselta, on tulos negatiivinen.

Testi-ikkunan yläosassa näkyy 1 viiva: kontrolliviiva.

Viiva voi olla vaalea tai tumma.

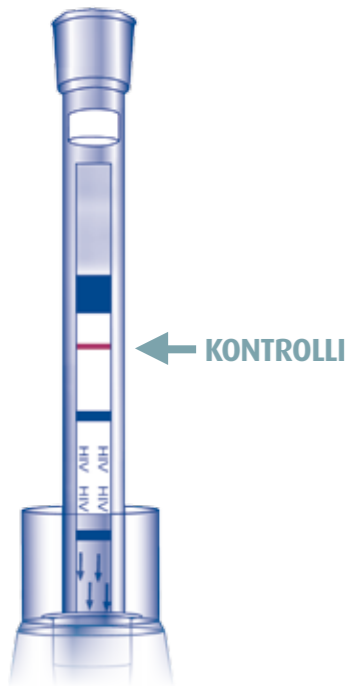

**TESTITULOKSESI ON NEGATIIVINEN
SINULLA EI TODENNÄKÖISESTI
OLE HIV-TARTUNTAA**

autotest VIH® on luotettava testi, mutta:

Jos tuloksesi on negatiivinen, on tärkeää varmistaa, että et ole tartunnan alkuvaiheessa (*serokonversio).

Jos arvelet altistuneesi hi-virukselle viimeisen kolmen kuukauden sisällä, et voi olla vielä varma hiv-negatiivisuudestasi. Sinun tulee tehdä kotitesti uudestaan, kun mahdollisesta altistumisesta hi-virukselle on kulunut kolme kuukautta.


*Serokonversio tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan muodostamaan riittävä määrä HIV vasta-aineita, jotta ne ovat havaittavissa.

POSITIIVINEN TESTITULOS

Jos testipuikon näkymä vastaa jotakin alla esitetyistä, on tulos positiivinen.

Näkyvissä 2 viivaa: kontrolliviiva ja testiviiva.

Toinen viivoista voi olla vaaleampi tai tummempi kuin toinen.

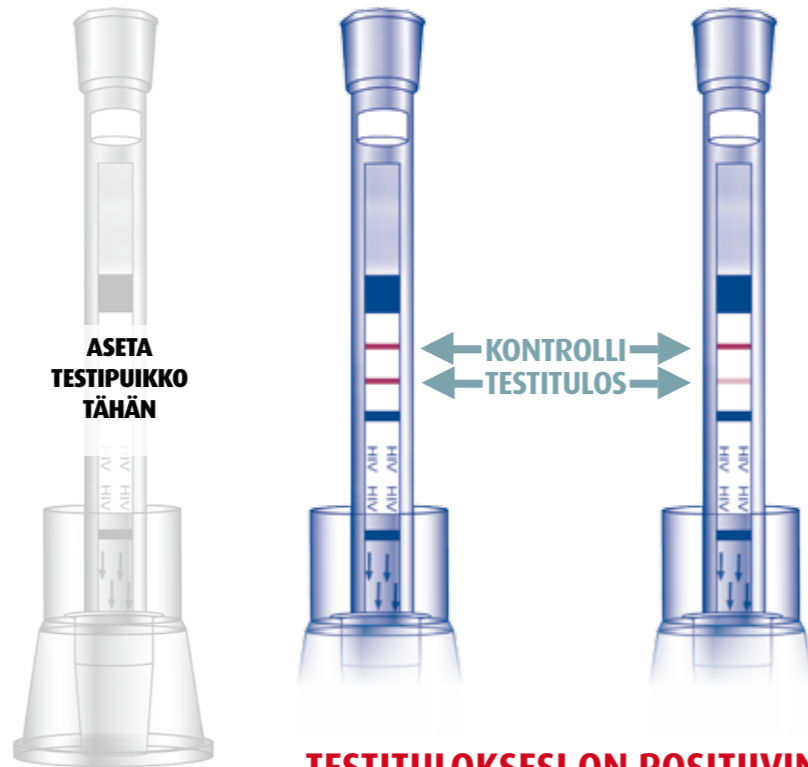


**TESTITULOKSESI ON POSITIIVINEN
SINULLA ON TODENNÄKÖISESTI
HIV-TARTUNTA**

- 1. OTA YHTEYS terveydenhuoltoon mahdollisimman nopeasti ja kerro, että olet tehnyt HIV-kotitestin, jonka tulos oli positiivinen.**
- 2. KOTITESTISI TULOS ON VARMISTETTAVA OTTAMALLA VAHVISTAVA LABORATORIOTESTI.**
- 3. SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA.**

Vältä ennen vahvistustestin tulosten saamista kaikkea toimintaa, joka voi altistaa muita henkilöitä HI-virukselle.

Jos tulokset eivät näytä samalta kuin ylläolevissa esimerkeissä (ei viivoja tai vain testiviiva), tulokset ovat pätemättömiä. Tämä tarkoittaa, että testisi ei toimi. Tällöin tulosta ei ole mahdollista tulkita ja sinun tulee tehdä toinen testi. Useiden pätemättömien tulosten kohdalla ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Paikalliset viranomaiset saattavat katsoa käytetyt pistolaitteet sairaalajätteiksi. Loukkaantumista välttämiseksi noudata niiden hävittämisessä paikallisia suosituksia. Kysy neuvoa apteekista. Lisätietoja sivustolta www.autotest-sante.com

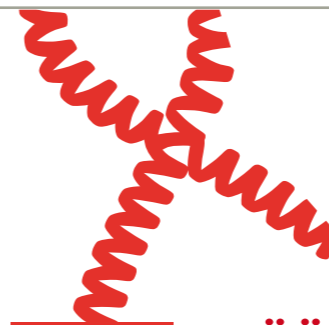

- > Tarvitsetko tukea ja ohjausta?
- > Tarvitsetko apua kotitestin suorittamisessa tai tulkinnaissa?
- > Haluatko kysyä jotain HI-viruksesta tai muista seksiteitse tarttuvista taudeista?

LISÄÄ TIETOA: HIVPOINT.FI

HIVPOINTIN NEUVONTAPUHELINNUMERO 0207 465 705

ON AVOINNA MAANANTAISTA TORSTAIHIN KLO 10.00-15.30

PERIAATE JA SUORITUSKYKY

autotest VIH® on immunokromatografinen testi, jonka avulla todetaan ihmisen veressä HI-virustartunnan jälkeen muodostuneet vasta-aineet.

Kontrolliviivan ilmestyminen näkyviin antaa mahdollisuuden tarkistaa testin toiminta.

Herkkyys*: Testin herkkyys on laskettu olevan 100%, jonka luotettavuus on 99.1% ja 100% väliltä. Kaikki HIV-positiiviset koehenkilöt tässä tutkimuksessa saivat oikean tuloksen. Yhtäkään väärää negatiivista tulosta ei todettu.**

Tarkkuus*: Testin tarkkuus on laskettu olevan 99.8%, jonka luotettavuus on 99.5% ja 100% väliltä. 0.2% hiv-negatiivisista koehenkilöistä saivat virheellisen tuloksen, toisin sanoen 0.2% tuloksista oli väärä positiivisia.***

Luotettavuus: Käytetty tutkimus maallikon testin käytöstä osoitti, että yli 99.2% osallistujista saivat tulkittavan tuloksen ja yli 98.1% tulkitse tuloksen oikein. Positiiviset tulokset tulkittiin oikein 100% tapauksista.

Häiriötekijät: Tutkittaessa näytteitä, jotka sisälsivät testin tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia aineita tai lääketieteellisiä tekijöitä, ei havaittu vaikutusta tuloksiin.

Yksityiskohtaiset tiedot ylläolevista tuloksista ovat saatavilla osoitteessa www.autotest-sante.com

* Tutkimukseen osallistui 503 (herkkyys) ja 2051 (tarkkuus) henkeä Yhdysvalloista ja Euroopasta.

** Väärä negatiivinen: yksilö, joka on tiedettävästi positiivinen koehenkilö ja virheellisesti saa negatiivisen tuloksen testistä.

*** Väärä positiivinen: yksilö, joka on tiedettävästi negatiivinen koehenkilö ja virheellisesti saa positiivisen tuloksen testistä.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- Kotitesti on tarkoitettu ainoastaan HI-viruksen toteamiseen, sitä ei voi missään tapauksessa käyttää muuhun diagnosointiin tai muuhun käyttöön.
- Kotitestissä saa käyttää ainoastaan tuoretta sormenpään verinäytettä.
- Säilytä kotitesti alkuperäispakkauksessa, kuivassa ja viileässä paikassa (8-30 °C), valolta suojattuna.
- Kotitesti on kertakäyttöinen ja testi on suoritettava 18-30 °C lämpötilassa. Älä käytä missään tapauksessa uudelleen.
- Avaa pakkaus vasta, kun olet valmis suorittamaan testin.
- Kotitestiä ei ole tarkoitettu antiretrovirushoitoa saavien potilaiden tarkkailuun.
- Kotitestin käyttäjän ei tule tehdä lääkintää liittyviä päätöksiä neuvottelematta siitä lääkärin kanssa, olipa tulos positiivinen tai negatiivinen.
- Vääriä positiivisia (0.2% tutkimuksen tarkkuudesta) tai vääriä negatiivisia tuloksia saattaa tulla seuraavissa tilanteissa: altistuminen hi-virukselle kolmen kuukauden sisällä testin suorittamisesta (serokonversio), harvinaisesta muutoksesta kehittynyt immuunipuutos tai tulehdus ja HIV-potilaan saadessa antiretroviraalista hoitoa.
- Testin säilyttäminen muissa kuin suositelluissa olosuhteissa tai käyttörajoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.
- Älä käytä kotitestiä jos pakkaus tai foliopakkaus ovat auenneet tai vahingoittuneet.
- Älä käytä kotitestiä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Jos sinulla on vaikeuksia ymmärtää pakkauksen käyttöä tai käyttöohjeita, ota heti yhteyttä Hivpointin neuvontanumeroon 0207 465 705 (ma-to klo 10.00-15.30).
- Säilytä kotitesti ja sen osat lasten ulottumattomissa, testin osat voivat olla vaarallisia nieltäessä ja aiheuttaa ärsytystä.
- autotest VIH® on muiden mahdollisuuksien ohella täydentävä vaihtoehto HI-viruksen toteamiseksi. autotest VIH® paljastaa ainoastaan HI-virustartunnan, mutta ei muita sukupuolitauteja.
- AAZ-LMB kieltäytyy kaikesta vastuusta, joka liittyy autotest VIH®:n tai sen osien käyttöön tai jakeluun voimassa olevissa käyttöohjeissa mainittujen suositusten ja käyttörajoitusten vastaisesti.

Lisätietoja ja esittelyvideo ovat saatavilla sivustolla www.autotest-sante.com

VALMISTAJA AAZ-LMB
Sogaris 217 - 94664 Rungis Cedex - Ranska

CE 0459

RANSKALAINEN VALMISTAJA



Merkkien selitys:

: lue käyttöohjeet huolella

: älä käytä uudelleen

: in vitro -diagnosiilaitte

: viimeinen käyttöpäivä

CE : CE-merkintä

: säilytettävä +8 - 30 °C

: Huomio! Puskuriaine:

Sisältää natriumatsidia > 0,2 %; terveydelle haitallista nieltynä. Kosketuksissa happoon vapautuu erittäin myrkyllistä kaasua. Haitallista vesiliöille, aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää gentamysiinisulfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varo aineen joutumista silmiin, iholle tai vaatteille. Kerää laikkynt kemikaali.